

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ PLANTA MP-018



 #planta_beauty

 PLANTA

www.planta.ru.com

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование массажной подушки

С помощью этой массажной подушки Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Массажер можно использовать для массажа любой области тела - спины, плеч, поясницы, ног, бедер, живота. Данная массажная подушка имеет широкий спектр применения. Массаж - одна из самых эффективных практик для оздоровления организма. Человечество не знает более древнего способа избавления от недугов - тысячи лет назад люди лечили друг друга руками, управляя энергией и воздействуя на проблемные зоны. Обычно массаж служит для расслабления мышц и улучшения самочувствия. Массаж с помощью данного устройства оказывает расслабляющее и стимулирующее действие. Было доказано, что он уменьшает напряжение в мышцах и снимает усталость.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей массажной подушки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta.ru.com

Техника безопасности

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.



- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.



- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Кроме этого, нельзя использовать устройство для лечения заболеваний суставов, позвоночника, головы и других чувствительных мест.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в мышцах или суставах, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

Примечания

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Массажер отключается автоматически через 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.


Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.



Описание изделия: массажная подушка

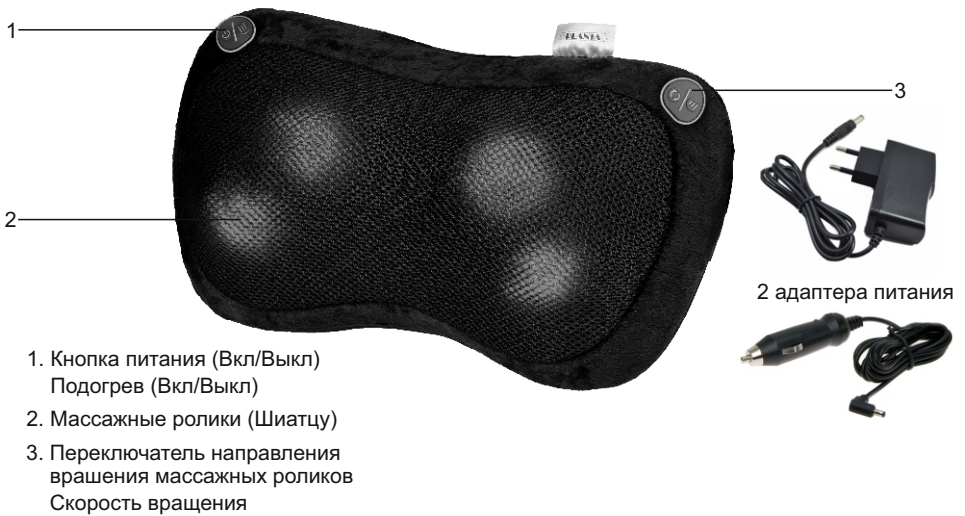

Начало использования

- Убедитесь в том, что прибор, штекер и кабель не повреждены.
- Поместите массажное устройство на стуле или удобно разместите на автомобильном сиденье.
- Подключите прибор к сети.

Управление

1. Сначала осторожно прижмитесь участком, который Вы хотите массировать, к прибору для массажа. Прибор можно использовать на бедрах, стопах, пояснице и шейно-воротниковой зоне.

Убедитесь, что положение массажера для Вас удобно.

Массаж всегда должен быть расслабляющим и приятным. Если массаж вызывает неприятные ощущения или боль, прервите массаж, измените положение или силу нажима.

2. Чтобы включить прибор для массажа, нажмите кнопку питания. Массажные головки начнут вращаться, заработает функция тепла. Повторное нажатие кнопки, отключит эту функцию. Третье нажатие отключит массажер.

3. Смените направление вращения массажных роликов с помощью переключателя направления вращения.

- Первое нажатие изменит направление вращения против часовой стрелки.

- Повторное нажатие направит ролики по часовой стрелке. Ролики меняют направление автоматически каждую минуту.

4. Для изменения интенсивности массажа нажмите кнопку переключения скорости. По умолчанию, будет выставлена высокая скорость.

- Третье нажатие снизит скорость вращения до средней.
- Четвёртое установит низкую скорость вращения.
- Пятое нажатие установит высокую скорость вращения.

Используйте прибор для массажа не дольше 15 минут. Чрезмерная стимуляция мышц при длительном массаже может привести к их напряжению вместо расслабления.

5. Когда массаж будет закончен, прибор автоматически отключится (через 15 минут). Чтобы прервать сеанс, повторно нажмите кнопку питания и прибор отключится.

Хранение, перевозка и регулярный осмотр

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке массажной накидки.

Технические характеристики

Модель: MP - 018
Питание:
AC 100V-240V/50-60HZ
DC 12V/2A
Мощность: 24Вт

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.




Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшее изделие.

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/ 2011, ТР ТС 020/ 2011



<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p>
<p>6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: "Сямьнь Хелспал Электроник Ко., Лтд.", Адрес изготовителя: №148 Бингланг Ксили, Симинг Дистрикт, Сямьнь, Фуджиан, Китай Филиал завода-изготовителя: «Ксиань Фар Ист Импорт & Экспорт Лтд.»</p>	<p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p>
<p>Адрес филиала завода-изготовителя: №34 Саус Ханкхенг роуд, Ксиань, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605 Служба сервисной поддержки потребителей:</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p>
<p>https://www.planta.ru.com +7 (499) 703 04 95 Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011</p> 	<p>М.П.</p>