


PLANTA

**ДВУСТОРОННИЙ ТУРМАЛИНОВО-
НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОЙ МАТ**

PLANTA

PL-CANVAS5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

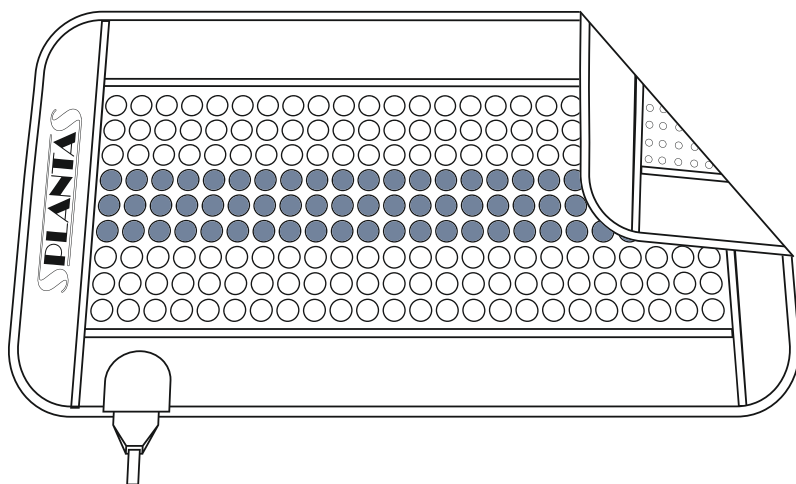

 #planta_beauty

www.planta.ru.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукции: ДВУСТОРОННИЙ ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОЙ МАТ

Модель: PL-CANVAS5

Материалы: нефрит, турмалин, керамическая глина Майфан, термостойкий материал/искусственная кожа

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 210 Вт


Регулировка температуры: от 20 до 70°C

Количество камней: 216 шт. (144 шт. – натуральный нефрит, 72 шт. – турмалин), гранулы керамической глины Майфан

Размер: 148 x 66 x 2 см

Вес: 8 кг

Автоотключение через 8 часов

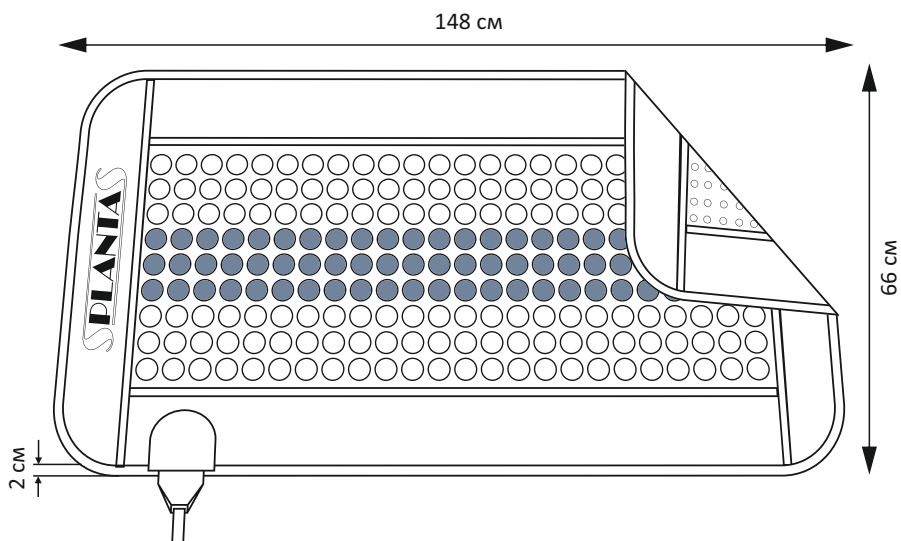

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ДВУСТОРОННИЙ ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАТ PL-CANVAS5 предназначен для прогревания тела. Регулярное использование мата способно защитить от простуд и других недугов за счет поддержания иммунитета, а также избавиться от стресса, успокоить нервную систему и улучшить сон. Обе стороны мата являются рабочими, оказывая различное терапевтическое воздействие. 144 нефритовых и 72 турмалиновых кристаллов мата, соприкасаясь с кожей тела, имитируют нажатие пальцев, как при точечном массаже, одновременно прогревая ткани организма. Это значительно улучшает кровообращение, т.к. к прогреваемым точкам активно поступает обогащенная кислородом кровь. Обратная сторона мата с наполнителем из маленьких гранул керамической глины Майфан идеально подойдет для прогрева во время ночного сна. Майфан является разновидностью гранитного порфира. На микроуровне имеет пористую структуру. Содержит множество питательных элементов - кальций, цинк, железо, магний, медь, селен, каждый из которых важен для поддержания здоровья человека. Керамическая глина Майфан известна не только как профилактическое средство, но также является проверенным лечебным веществом, его гранулы во время нагревания выделяют анионы, излучая длинноволновое инфракрасное излучение, стимулирующее клетки выводить из организма токсичные вещества, включая свинец и ртуть, оказывая положительное воздействие в избавлении организма от язв и опухолей. Температура нагревательного элемента варьируется от 20°C до 70°C, излучая при этом длинноволновое инфракрасное тепло и отдавая его телу человека. В целях безопасности мат оснащен двумя тепловыми сенсорными предохранителями, а также функцией автоотключения через 8 часов. Инфракрасный прогрев благоприятно воздействует на весь организм. Нихромовый кабель, который нагревает мат, равномерно уложен по поверхности, поэтому все 220 керамических пластингреваются до одинаковой температуры. Фольга в нижней части мата помогает греть только тело, а не пол или диван. Действие основано на инфракрасном тепловом воздействии с использованием кристаллов, включая нефрит и турмалин. При нагревании эти кристаллы создают инфракрасное тепло, которое проникает в тело человека на 10-15 см, что улучшает кровоток и микроциркуляцию, расширяя кровеносные сосуды и расслабляя мышцы в области нагрева. Инфракрасные волны усиливают обмен веществ и облегчают болевые ощущения. Прогревание способствует нормализации кровообращения в зоне воздействия, полезно для повышения выносливости организма, для улучшения сна, для снятия напряжения в мышцах и уменьшения застойных явлений, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, избавляет от стресса.

В результате воздействия инфракрасного излучения происходит расслабление гладких мышц внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и лимфоток, повышается содержание кислорода в крови, регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные функции клеток. Лечебный эффект мата проявляется в улучшении сна, устранении усталости, повышении подвижности суставов, восстановлении работы почек, нормализации давления, улучшении состояния кожи, а также профилактике заболеваний позвоночника, в том числе остеохондроза и радикулита. Мат помогает прогреть ткани перед сеансом массажа и устраняет боль в мышцах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- При острых заболеваниях;
- При наличии гипертермии;
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует использование);
- Если тело человека влажное;
- При чувствительности к тепловому прогреванию

ОПИСАНИЕ

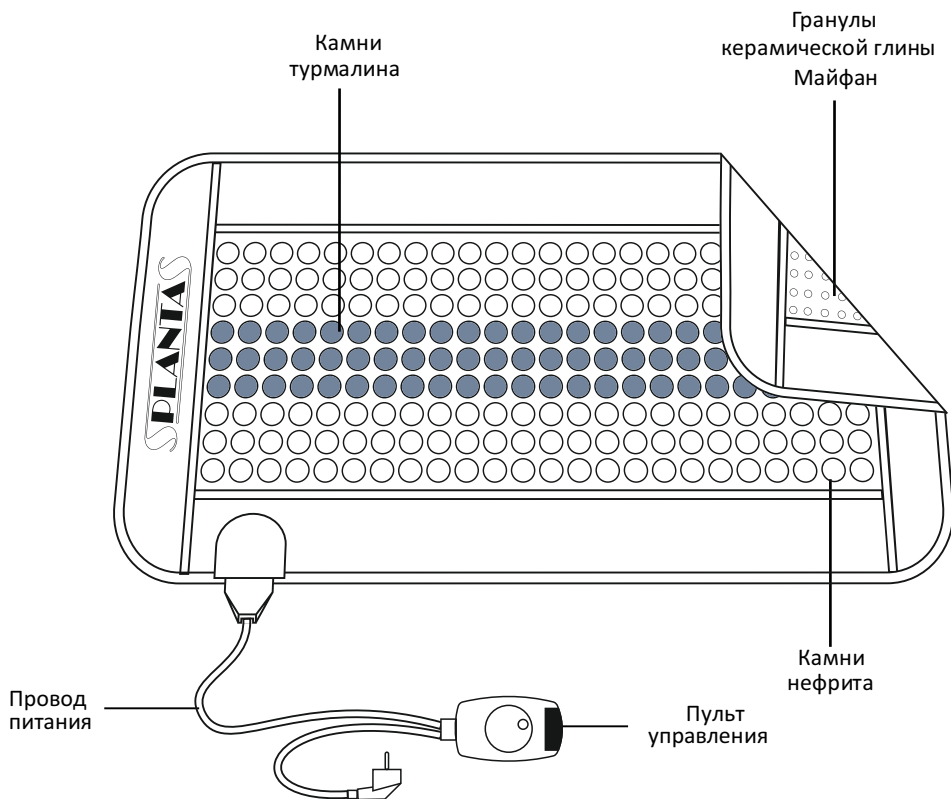




1. Кнопка включения/выключения
2. Индикатор включения в сеть
3. Регулятор температуры
4. HIGH – Максимальная температура, LOW – Минимальная температура
5. Индикатор нагрева при достижении установленной температуры загорится красным

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подсоедините клеммы мата, следуя рисунку ниже.

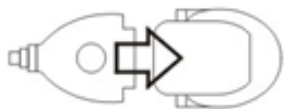

- Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
- Поверните регулятор 3 по часовой стрелке до щелчка. На дисплее загорится индикатор включения (зеленая лампочка).
- Нажмите кнопку включения 1. На дисплее отобразится значение температуры мата в Цельсиях в течение 3 секунд, затем - исходная температура мата.
- Поверните регулятор 3 по часовой стрелке и установите нужную температуру нагревательного элемента (выбранная температура отображается на дисплее в течение 3 секунд, затем - исходная температура мата). По мере его нагревания температура будет повышаться, пока не достигнет заданной, что изобразится на дисплее. При достижении установленной температуры индикатор загорится нагрева (красная лампочка).
- Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15-20 минут.
- Для выключения мата после его использования нажмите кнопку, поверните регулятор 3 против часовой стрелки до щелчка и отключите провод питания от сети.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

- Прогрев до 45°C: Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и гормональную системы. Не имеет противопоказаний для использования.
- Прогрев от 45°C до 55°C: Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет мышцы.
- Интенсивный прогрев от 55°C до 70°C: Эффект прижигания. Уникальный режим нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.
- Время полезного воздействия 15-30 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для дальнейшего использования.

Сохранность и эффективное использование турмалинового теплого мата возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым использованием мата осмотрите его и убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования мата проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет его использовать.

Во время использования мата следите за своим самочувствием. Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться матом без присмотра со стороны.

Используйте необходимое напряжение для подключения мата, в противном случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте мат в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.

Ни в коем случае не используйте мат при видимых повреждениях шнура или вилки! Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.

Обязательно отключайте мат от сети после использования. Запрещено касаться мата влажными руками.

При возникновении какого-либо отклонения в работе мата (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать мат! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время использования турмалинового теплого мата немедленно прекратите его использование.

Запрещено погружать мат в воду или другие жидкости во время его очистки.

Не используйте мат на улице. Не используйте мат после принятия алкоголя или при плохом самочувствии. Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки мата.

Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления.

ХРАНЕНИЕ

- Поместите мат в упаковку.
- Храните мат в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения мата с острыми или режущими предметами, которые могут его повредить.
- Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

УХОД

- Прежде чем начать чистить мат отключите его от сети и дайте остыть.
- Очищайте мат мягкой сухой тканью.
- Во время чистки не погружайте мат в воду или другие жидкости.
- Для чистки мата не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двусторонний турмалиново-нефритовый тепловой мат
- Пульт управления
- Инструкция
- Сумка для переноски и хранения

УТИЛИЗАЦИЯ МАТА

Утилизируйте мат согласно требованиям положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

Венжоу Поп Релакс Ко., Лтд., по адресу №57, Картон Индастриал Зоун, Вуянг, Аоджанг Таун, Пингянг каунти, Венжоу, Китай Страна-производитель: Китай

Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт» 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

Служба поддержки потребителей:

+7 (499) 703 04 95 www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.