

# beurer

## MG 30



**RUS** **Мини-массажер, подарочный набор**  
Инструкция по применению



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255  
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



## 1. Использование по назначению

Приборы должны использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

Эти приборы предназначены для массажа отдельных участков тела человека. Не пользуйтесь массажными приборами в случаях, соответствующих одному или нескольким из следующих предупредительных указаний.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Не используйте массажный прибор

- для проведения массажных процедур для детей,
- для массажа участков кожи с повреждениями (например, ожоги, открытые раны, шрамы, сыпь или другие повреждения),
- при заболеваниях, связанных с кровообращением или головными болями,
- для массажа костей (например, суставов, позвоночника) или других чувствительных участков тела.
- после операции,
- во время беременности,
- при приеме медикаментов или алкоголя (ограничена восприимчивость!),
- при эксплуатации транспортных средств,
- прибор предназначен для наружного применения.

Данные приборы не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями или опытом, за исключением

случаев, когда за ними осуществляется надлежащий надзор, или если они получают от Вас инструкцию по использованию прибора. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с приборами.

Применение прибора не заменяет врачебных консультаций и лечения.

Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом

- если Вы носите кардиостимулятор, электрические имплантаты или другие вспомогательные средства,
- при болях невыясненного происхождения,
- если Вы не уверены, подходит ли прибор для Вас.

## **Указание**

Массаж всегда должен приносить расслабляющее и приятное чувство. Если массаж приносит болезненные или неприятные чувства, прервите его или смените положение массажера, или уменьшите усилие прижатия.

## **2. Указания по технике безопасности**

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

- Перед использованием убедитесь, что приборы и их принадлежности не имеют видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте приборы и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.
- Не используйте дополнительные детали, не рекомендованные изготовителем или не предлагаемые им в качестве принадлежностей.
- Ни в коем случае не открывайте приборы и не ремонтируйте их самостоятельно, поскольку надежность функционирования в таком случае больше не гарантируется. Несоблюдение ведет к потере гарантии. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу или в авторизованную торговую организацию.

### 3. Применение

Укладка и замена батареек:

- Откройте отсек для батареек данного прибора.
- Вставьте в отсек для батареек 2 щелочные или 2 обычные батарейки типа ААА в соответствии с маркировкой. Соблюдайте правильную полярность!
- Установите крышку отсека для батареек на прибор и защелкните ее. Обратите внимание на правильное положение крышки!




Нажатие кнопки: раз вкл / раза выкл

#### Обращение с батарейками

Следите за тем, чтобы батарейки не попали в руки детям. Дети могут взять батарейки в рот и проглотить их. Это может нанести серьёзный вред здоровью. В таких случаях необходимо сразу же обратиться к врачу!

- Обычные батарейки запрещается заряжать, нагревать или бросать в открытый огонь (опасность взрыва!).
- Вовремя меняйте все батарейки одновременно, используйте батарейки одного типа и не пользуйтесь аккумуляторами.
- Разряженные батарейки могут стать причиной неисправности прибора. При длительном перерыве в использовании прибора доставайте батарейки из отсека.
- Запрещается использовать аккумуляторы!

## Прибор для массажа головы

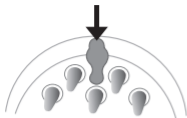

- Перед тем как открыть крышку отсека для батареек, оттяните планку вниз.
- Установите крышку отсека для батареек и после этого снова защелкните планку

## 4. Чистка прибора и уход за ним

Эти приборы для массажа не требуют особого обслуживания. Только наружный корпус требует регулярной очистки. Перед очисткой выньте батарейки из отсека для батареек.

При очистке мини-массажера действуйте осторожно и используйте только слегка влажную салфетку.


- Категорически запрещается использовать чистящие средства или растворители.
- Ни в коем случае не опускайте приборы в воду, так как в этом случае в них может попасть вода и повредить приборы.

## 5. Утилизация

Приборы следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы утилизировать в особо обозначенные сборники, сдать их в приемные пункты или специализированные магазины. Закон требует от Вас утилизации батареек.

**Примечание:** Эти символы Вы найдете на батарейках, содержащих вредные вещества: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

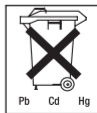

## 6. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: бытовые массажеры – ОС "Межрегиональная Сертификационная Компания" №РОСС DE. АВ52.В35744

срок действия с 18.03.2011 по 17.03.2014 гг

Срок эксплуатации изделия: минимум 3 года

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218  
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО БОЙРЕР, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62,  
корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2  
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



