



**Массажный пистолет
МНН-100
для перкуSSIONного
глубокого массажа мышц тела,
5 насадок, 6 режимов, 6 скоростей
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



 #planta_beauty

www.planta.ru.com

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование ручного массажера

С помощью этого массажера Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Устройство используется для массажа любых зон тела: шеи, плеч, ног, спины и др. Массаж с помощью этого массажера оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, устраняет психологическое напряжение, помогает избавиться от усталости.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера для тела, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta.ru.com

Техника безопасности

- Данное устройство заряжается от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности во время зарядки выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель во время зарядки не должен касаться острых краев.
- Для отключения прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.



- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.



- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.

Примечания

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Полезное действие массажа составляет 15 минут - что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.




Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Запрещено снимать панели устройства т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.



Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

Описание изделия:

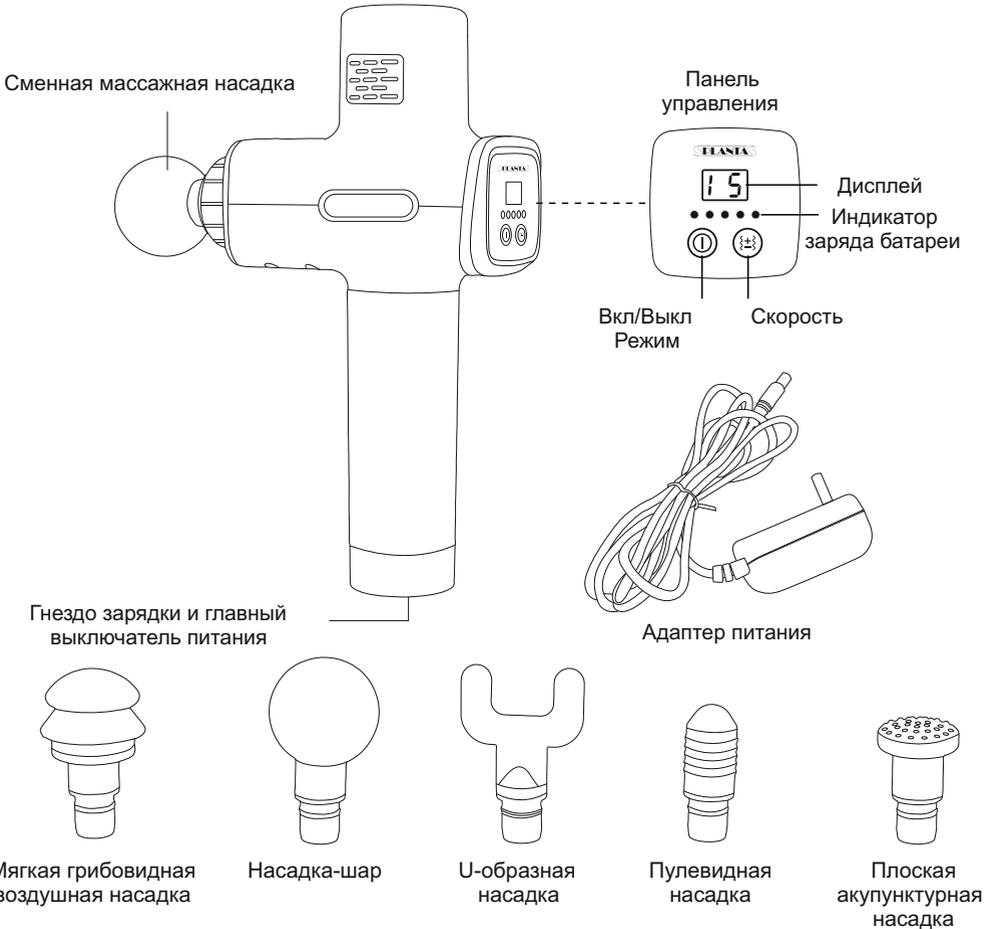

Мягкая грибовидная воздушная насадка

Зона применения - все тело. Отличается относительно мягким воздействием на ткани. Благодаря упругой воздушной прослойке, массаж проходит безболезненно даже в зонах с наибольшей чувствительностью. Подходит для первоначального снятия напряжения, с последующим переходом к другим насадкам, для более интенсивного массажа.

Насадка - Шар

Зона применения - крупные группы мышц спины и конечностей. Наиболее универсальная насадка, изготовлена из специального упругого вспененного материала, позволяющая работать под различными углами и менять вектор воздействия на ткани, добиваясь нужного эффекта. Этой насадкой удобно массировать различные группы мышц, кроме самых мелких, а форма позволяет удобно обрабатывать любые поверхности тела. Способность шара к небольшой упругой деформации предохраняет об болезненных ударов по суставам и костям.

U образная насадка

Специализированная насадка для работы с паравертебральной зоной позвоночника (зона мышц разгибателей спины, расположенных рядом с позвоночником справа и слева). Насадка позволяет одновременно и симметрично массировать мышцы-разгибатели спины справа и слева от позвоночника. Во время массажа насадка располагается перпендикулярно массируемому тканям. Важно!: Линия позвонков должна располагаться между рогами насадки, и непосредственное воздействие на позвоночник должно быть исключено.

Пулевидная насадка

Зона применения - точки на теле и конечностях. Специализированная насадка для работы с триггерными точками (т.е. болевые точки, участвующие в формировании спазмированных участков мышц или тканей), акупунктурными точками или с глубокими мышцами. Насадка обеспечивает наиболее концентрированное воздействие. Это позволяет снять спазм и инактивировать триггерную точку. Массаж с этой насадкой требует сноровки и осторожности, т.к. воздействие может быть достаточно болезненным.

Плоская акупунктурная рельефная насадка для борьбы с целлюлитом

Зона применения бедра, ягодицы, руки, бока, живот. Обеспечивает наиболее интенсивное воздействие на поверхностные ткани: кожу, подкожную клетчатку, поверхностные слои мышц. Массаж этой насадкой вызывает приток крови к тканям, насыщает их кислородом, ускоряет местный метаболизм. Это позволяет, с одной стороны, ускорить регенерацию при повреждениях, а с другой стороны, ускорить и усилить метаболические процессы при корректирующем массаже. Позволяет эффективно устранять проявления целлюлита, подтягивает и выравнивает поверхность. Оптимально сочетать массаж этой насадкой с ручным воздействием и различными косметическими средствами (антицеллюлитные масла, кремы и т.п.)

Начало использования (инструкция):

1. Осмотрите массажер. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и шнуре питания.
2. Установите необходимую для массажа насадку (различаются по форме и жесткости материала)

Важно! Снятие и установку насадок производите только на выключенном из сети массажере.

3. Зарядите устройство с помощью адаптера питания от электрической сети 220 В. Перед началом использования, отключите прибор от зарядного устройства.
4. Нажмите кнопку «Вкл /Выкл» в основании прибора, чтобы включить питание.
5. Нажмите кнопку  чтобы включить массажер. Прибор начнёт работу на 1 режиме, на низкой скорости. В процессе массажа на экране будет отображаться время массажа.
6. Нажмите кнопку «Скорость», чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа. Доступно 6 уровней скорости массажа.
7. Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из 6 автоматических режимов массажа.
8. Удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы прекратить работу массажера. Нажмите кнопку «Вкл /Выкл» в основании массажера, чтобы отключить питание прибора.

Прибор автоматически отключается через 15 минут использования.

Время использования будет указано на электронном табло.

Область использования:

Массажер для тела Planta – это домашний многофункциональный вибромассажер, предназначенный для проведения массажа всего тела.

Рекомендуется в оздоровительных и лечебно-профилактических целях дома и на работе. Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный массаж для спины и тела как точечный, так и по всей площади выбранной зоны.

Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж всего тела без особых усилий: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни.

Безопасные силиконовые сменные насадки (5 видов) позволяют выбирать вид массажа. Насадки выполняют различные функции: поверхностный для профилактики целлюлита, глубоко проникающий мышечный массаж для эффективного размягчения тканей после нагрузки или снятия болей.

Хранение, перевозка и регулярный осмотр

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

Технические характеристики

Модель: МНН-100
Питание: 26В/1А
Мощность: 25Вт

Полная зарядка: 3 часа
Время работы после полной зарядки: 4-6 часов

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на издании или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

«Чжэцзян Люяо Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд.»
Вэй 1 роуд, Меканикал парк, Ванкуан Лайт
Индастриал Бейз, Пиньян Каунти, Венжоу, Чжэцзян,
Китай

Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт» 117342, город Москва, улица
Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605

Служба поддержки потребителей:

+7 (495) 641 61 39 www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и
внешнему виду не имею, с условиями гарантии
согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.