



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНОЙ
НАКИДКИ PLANTA MN-1000**



#planta_beauty

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование массажной накидки

Массаж Шиаци был открыт в Японии около 100 лет назад и представляет собой японскую методику надавливания на определённые точки с целью восстановления в организме запаса энергии для наилучшего противостояния внешним факторам и заболеваниям. Массаж при помощи массажной накидки Planta производится по древней восточной технологии. Он оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, устраняет психическое напряжение, помогает расслабиться в стрессовых ситуациях или же восстановиться и взбодриться, когда это необходимо. Вращение массажных роликов имитирует движения рук профессионального массажиста.

С помощью этой массажной накидки Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Данная накидка не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что эта массажная накидка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Накидка предназначена для личного использования. В комплект входит дополнительный авто адаптер, накидку можно использовать в автомобиле. Не используйте накидку во время движения автомобиля. Накидка не предназначена для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей накидки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы массажной накидки. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче накидки другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta.ru.com

Техника безопасности

- Данная накидка работает от электросети. Поэтому на нее распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте накидку только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали накидки находятся в исправном состоянии.
- В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите накидку и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт накидки могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте накидку самостоятельно. Отдельные компоненты этой накидки нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Не используйте накидку дольше, чем 15 минут. Если Вы не используете накидку, отключите ее от электрической сети.

- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать накидку, сделайте ее непригодной для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данную накидку запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования накидки под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали накидку в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте накидку от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Накидку можно использовать только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать накидку.
- Ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Никогда не используйте данную накидку совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данная накидка может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

Предупреждения

- Перед использованием накидки проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте накидку, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте накидку, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В накидке имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия накидки составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

Примечания

- Если Вы используете накидку непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Полезное действие массажа составляет 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.



Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте накидке остыть. Накидку можно снова использовать после того, как она полностью высохнет. Запрещено разбирать накидку или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами

Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

ВНИМАНИЕ! МАССАЖНАЯ НАКИДКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Хранение, перевозка и регулярный осмотр

- Если Вы не используете накидку, храните ее в сухом месте.
- Прежде чем сложить накидку для хранения, дайте ей полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на накидку тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей накидки.
- Не допускайте падения накидки. Это может привести к ее повреждению.

Описание



Пульт управления



Автомобильный адаптер



Сетевой адаптер



1 – кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ накидки;

2 – кнопка активации функции подогрева в зоне спины и шеи;

3 – кнопка активации массажных роликов Шиаци в зоне всей спины;

4 – кнопка активации массажных роликов Шиаци только в верхней части спины (в области от лопаток до плеч);

5 – кнопка активации массажных роликов Шиаци только в нижней части спины (в области от поясницы до лопаток);

6 – кнопка активации массажных роликов Шиаци в зоне шеи;

7 – кнопки регулировки высоты массажных роликов Шиаци для шеи (массажной подушки) выше/ ниже; регулируемая высота положения массажной подушки: 55 - 67 см (ход 12 см);

8 – кнопка активации точечного массажа спины;

9 – кнопки регулировки высоты расположения массажных роликов для точечного массажа выше/ниже и фиксации верхней/нижней границ для массажа заданной области;

10 – кнопка активации и регулировки интенсивности вибромассажа бедер.


Начало использования

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Не допускается использование массажной накидки в автомобиле во время его движения. Это может привести к серьезным телесным повреждениям.



Крепление массажной накидки

Накидку можно использовать, расположив ее на офисном кресле или стуле, домашнем кресле или на диване и на автомобильном кресле. Удобное крепление на липучке не позволяет накидке скользить во время использования.

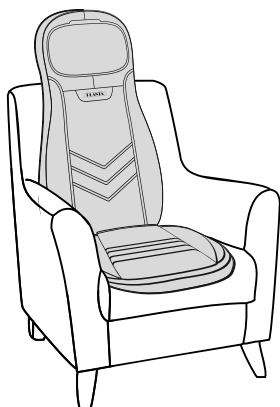

Инструкция по эксплуатации

1. Осмотрите массажную накидку. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.

2. Подключите адаптер питания к разъему на массажной накидке.

3. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.

4. Расположите накидку на сидении/диване/кресле/стуле так, чтобы сидеть и касаться спиной массажной поверхности. Зафиксируйте массажную накидку с помощью липучки на задней части спинки накидки.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы включить накидку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

6. МАССАЖ ШЕИ. Для массажа шеи нажмите кнопку  , для активации массажных роликов в зоне шеи и плеч, отрегулируйте удобную высоту массажной подушки, удерживая кнопки со стрелочками  /  вверх/вниз для вертикального движения подушки. Когда Вы прекратите удерживать кнопки со стрелочками вверх/вниз  /  , подушка автоматически остановится на выбранной высоте. Нажмите кнопку  второй раз, чтобы изменить направление вращения массажных роликов. Третье нажатие кнопки  отключает вращение массажных роликов в зоне шеи.

7. МАССАЖ СПИНЫ ШИАЦУ. Для массажа Шиаци всей спины выберите режим общего массажа  . Для массажа только верхней или только нижней части спины, нажмите кнопку  или кнопку  , массажные ролики займут верхнее или нижнее положение на накидке в зависимости от выбранной вами зоны и начнут мягкий массаж верхней (от лопаток до плеч) или нижней части спины (от лопаток до поясницы).

8. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ СПИНЫ. Для массажа спины в заданной точке (Массаж Шиаци без движений по вертикали), нажмите кнопку  и отрегулируйте удобную высоту массажных роликов, удерживая кнопки со стрелочками вверх/вниз  /  . Когда Вы прекратите удерживать кнопки со стрелочками вверх/вниз  /  , массажные ролики автоматически остановятся на выбранной высоте и начнут мягкий массаж в заданной точке без движения по вертикали.

Для массажа спины в заданной области нажмите и удерживайте кнопку  (), это нажатие зафиксирует верхнюю (нижнюю) границу выбранной области движения массажных роликов. Продолжайте удерживать кнопку  (), чтобы выбрать верхнюю (нижнюю) точку движения массажных роликов, индикатор будет мигать, а массажные ролики будут двигаться вниз (вверх). Как только Вы отпустите кнопку  (), массажные ролики прекратят свое движение вниз (вверх), индикатор перестанет мигать, а выбранная точка зафиксирует нижнюю (верхнюю) границу заданной области, в пределах которой будут двигаться массажные ролики.

9. ПОДОГРЕВ активируется однократным нажатием кнопки  , при активации

режима сама кнопка и массажные ролики подсвечиваются красным светом. Режим подогрева может работать в совокупности с любым режимом, или самостоятельно.

10. РЕЖИМ ВИБРОМАССАЖА. Режим вибрационного массажа бедер (область сиденья) можно активировать в дополнение к любому из выбранных режимов массажа. Нажимая несколько раз кнопку , можно последовательно выбирать желаемую интенсивность вибраций - низкую, среднюю, высокую и выключать этот режим.

11. АВТОТАЙМЕР. Автоматическое отключение через 15 минут.

12. Для использования массажной накидки в автомобиле используйте дополнительный авто адаптер, который входит в комплект.

13. Чтобы выключить накидку, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажные головки вращаются только медленно	Слишком большое давление на массажные головки	Уменьшите давление на массажные головки
Устройство не включается	Устройство не подключено к электросети	Вставьте вилку кабеля в розетку и включите устройство
Устройство не включается, хотя индикатор на адаптере горит	Возможно, устройство не включено	Включите устройство нажатием кнопки (Включить/ Выключить) и выберите область массажа
	Возможно, сработала защита от перегрузки	Отключите устройство и подключите его снова через несколько минут

Технические характеристики

Модель: MN-1000

Вес: 5.4 кг

Размеры:

Спинка (Д*Ш*Т, см): 78,4 * 45 * 15,4 см

Сиденье (Д*Ш*Т, см): 45 * 39 * 3 см


Подушка (Д*Ш*Т, см): 30 * 17,5 * 10,5 см

Длина сетевого шнура 1.5 м

Питание: 12В 4А

Мощность: 48Вт

Автоотключение через 15 мин

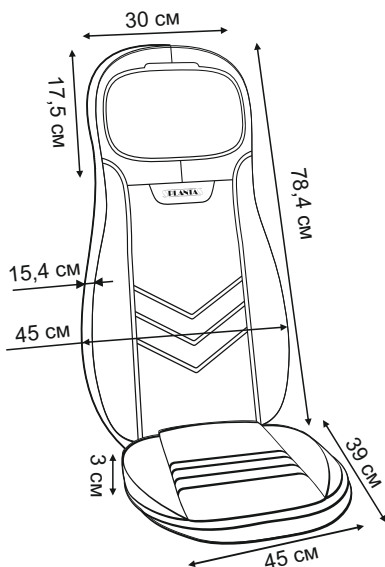

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую устройство.

Утилизация накидки

Утилизируйте накидку согласно требованиям

Положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантийный талон

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Чжэцзян Мондиал Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.», Адрес: №15 Чаоянг роад, Хайю Сабдистрикт, Санмень Каунти, Тайжоу Сити, 317100, Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta.ru.com +7 (499) 703 04 95 Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--